

Equipo compacto de 4 canales dedicado a pequeños laboratorios para realizar el screening de coagulación

Eficiencia en el análisis

- 4 canales de medición independientes
- 20 posiciones de incubación
- Fácil de usar, innovadora interfaz de usuario
- Gestión del Control de Calidad
- Curva master de calibración (no se necesita calibrar)

Seguridad

- Capacidad de lectura de códigos de barras
- Almacenamiento externo de datos (dispositivo USB)
- Reactivos listos para usar

Aumento de la eficiencia

- 3 métodos de medición de referencia: coagulativo, turbidimétrico y cromogénico
- Resultado en 120 segundos
- Sin mantenimiento

Fácil manejo

- Capacidad de almacenamiento interno
- Impresora integrada
- Dimensiones muy reducidas
- Múltiple conectividad:
 - Sistema de información de laboratorio
 - Software opcional de gestión Yumizen G



Yumizen

G400

By **HORIBA**
Medical

Coagulation Yumizen Range



Yumizen
G400

Dimensiones y peso:

Ancho: 20 cm ; Alto: 8 cm ; Profundidad: 32 cm ;
Peso: 2,55 kg

Rendimiento:

Máximo tiempo de medida de 120 segundos

Temperatura de funcionamiento:

15°C - 30°C

Alimentación:

100-240VAC, 47-63Hz, 25W.
Alimentación eléctrica externa

Exportación:

2 puertos USB:
1 conector USB maestro: para conectar al equipo una impresora externa, un lector de códigos de barras o un dispositivo de almacenamiento externo
1 conector USB esclavo: para conectar el equipo a un ordenador externo

Pantalla:

Pantalla LCD táctil a color de 115 x 86 mm

Capacidad de almacenamiento:

1000 resultados

Parámetros:

Tests coagulativos (640 nm)

Tests de screening (PT, APTT, Fibrinógeno y TT)

Factores (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)

Test turbidimétrico (570 nm)

D-Dímero*

Test cromogénico (405 nm)

ATIII*

Incluye (kit):

1 Yumizen G400
1 Unidad de alimentación eléctrica
1 Mezclador magnético (2 unidades por kit)
1 Manual de usuario

Normativa:

EN 61326-2-6 : 2006.

IEC 61010-1 : 2001.

IEC 61010-2-101 : 2002.

EN ISO 13485 : 2003 y 2012.

NF EN ISO 14971 – 2013.

Directivas:

98/79/EC (DIV)

2011/65/EU (RoHS)

1907/2006 (REACH)

2014/30/EU (Compatibilidad electromagnética)


2014/35/EU (Limitaciones de tensión)

***Los parámetros ATIII y D-Dímero están disponibles sólo para el Yumizen G400 DD**

HORIBA
Medical

FRANCE +33 (0)4 67 14 15 15 - ITALY +39 / 06 51 59 22 1 - SPAIN +34 / 91- 353 30 10 - PORTUGAL +351 / 2 14 72 17 70 - UK +44 (0) 1604 542650
POLAND +48 / 22 6732022 - USA +1 / 949 453 0500 - BRAZIL +55 / 11 2923-5439 - THAILAND +66 / 2 861 59 95 - CHINA +86 / 21 3222 1818
INDIA +91 / 11 4646 5000 - GERMANY AXON LAB AG +49 / 7153 92260 - DISTRIBUTORS NETWORK +33 (0)4 67 14 15 16

HORIBA Medical online : <http://www.horiba.com/medical>

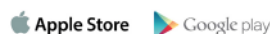

Operating IMS

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA